



Testen Sie die
LabXpert-Software
unverbindlich
einen Monat
GRATIS!

LabXpert

Mit Sicherheit Zeit sparen.

*Die Labor- und
Rezeptursoftware mit
Geräteanbindung.*

Keine versteckten
Update-Kosten

Zeitersparnis 

Dokumentation 

Transparenz 

Sicherheit 



pharma4u
Die Plattform für Pharmazeuten



LabXpert – die betriebssystem-unabhängige Software für Labor- und Rezepturprozesse mit Geräteanbindung

Mit unserer apotec® LabXpert Software sind Arbeitsprozesse im Labor- und Rezepturbereich so einfach, sicher und schnell, wie noch nie zuvor. Unsere innovative apotec®LabXpert-Software leitet Sie sicher und zuverlässig durch Ihre Prüfung von Ausgangsstoffen, Fertigarzneimitteln und Medizinprodukten. Protokollieren Sie einmal – und auf Basis dieser Parameter können Sie Rezepturen und Defekturen reproduzierbar herstellen.

LabXpert ist webbasiert und ermöglicht Ihnen, Ihre Daten von jedem webfähigen Gerät abzurufen, auch via Tablet oder Smartphone. Prozesse wie Freigaben oder Plausibilität können künftig damit noch flexibler durchgeführt werden. Durch regelmäßige Updates bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand.

Unser **WEPA-Fach Tipp:** Verwenden Sie die Software LabXpert zusammen mit unserem apotec® connect - die zentrale Geräteanbindung. Mit dem apotec® connect wird Ihr Gerätepark von Waagen, Mischsystemen bis hin zu Laborgeräten netzwerkfähig.

Der apotec® connect macht einen direkten Datentransfer der Mess- und Herstellungsparameter möglich. So werden durch 1:1-Übertragung von Mess- und Herstellungsparametern, Übertragungsfehler vermieden und Sie erhalten so mehr Sicherheit in der Dokumentation.

Durch die Integration verschiedener Tools, wie die Plausibilitätsprüfung mit pharma4u, DAC/NRF Rezepturenfinder, direkte Verlinkungen zu dem DAC/NRF Portal und die TOPITEC® Rührparameter-Bibliothek sowie der Geräteanbindung apotec® connect sparen Sie spürbar Zeit bei der Herstellung jeder Rezeptur.

Bei der Entwicklung unserer LabXpert-Software konnten wir auf unsere Fachkompetenz und das Know-How unseres Partners pharma4u zurückgreifen. Hier zählen sich die wertvollen Erfahrungen aus der täglichen Arbeit mit unseren Kunden aus. Sie profitieren von Bedienkomfort nach Wunsch und Leistung nach Maß!

LabXpert – eine Komplettlösung für Labor- und Rezepturprozesse – entwickelt von



Wer ist pharma4u?

pharma4u ist eine Tochter der Avoxa-Mediengruppe Deutscher Apotheker und der MedApo GmbH. pharma4u entwickelt seit einigen Jahren erfolgreich innovative, webbasierte Softwarelösungen für Apotheken und Pharmazeuten in der Ausbildung, wie die Medikationssoftware MediCheck, Labor+ und Live Webinare sowie diverse Prüfungstrainer.

Jetzt zur Software apotec® LabXpert wechseln und sich TOP-Angebote sichern!



LabXpert unterstützt Sie bei Prozessen und Arbeitsschritten in Labor und Rezeptur mit Geräteanbindung.

apotec® LabXpert	Best.-Nr.	VE	PE	AEP
apotec® LabXpert Software	026730	1	1	69,00 € monatlich
apotec® LabXpert Software Testversion	026735	1	1	1 Monat kostenlos
apotec® connect	026740	1	1	399,00 €

Ihre Benefits*** als LabXpert-Vollabo-Kunde bei unserem Partner pharma4u – ein Unternehmen der Avoxa-Mediengruppe:

	AEP
NEU Kostenloser* Premium Learning-Account bei unserem Partner pharma4u	statt 95,00-€ jährlich, kostenlos
NEU 10 % Rabatt** auf Premium MediCheck unseres Partners pharma4u	statt 95,00-€ monatlich, 85,50 €

- * Die kostenlose Nutzung des Premium Learning-Accounts unseres Partners pharma4u ist nur so lange gültig, wie Sie Voll-Abo Kunde von LabXpert sind.
** Der Rabatt i.H.v. 10 % ist nur so lange gültig, wie Sie Voll-Abo Kunde von LabXpert sind.
*** Beratung zu den Dienstleistungen Premium Learning und Premium MediCheck erhalten Sie über den Kundenservice unseres Partners pharma4u. (Email: info@pharma4u.de, Telefon: 06196/202558-0)

*LabXpert ist
ein echtes
Allround-Talent.
Was der Experte
alles kann...*

*... unterstützt,
assistiert und
dokumentiert...
und das jederzeit!*



*Prüfung von
Ausgangsstoffen*



*Plausibilitäts-
prüfung*



*Herstellungs-
anweisung*



Herstellung



*Herstellungs-
dokumentation*



Etikettierung



LabXpert unterstützt Sie bei Prozessen und Arbeitsschritten in Labor und Rezeptur

Umfasst die Bereiche Prüfung und Freigabe der Ausgangsstoffe, Packmittel, Fertigarzneimittel etc., Plausibilitätsprüfung, Herstellungsanweisung bis hin zur Herstellungsfreigabe

Abbildung, Erfassung und Dokumentation Ihrer Arbeitsschritte

Durchgängige Reproduzierbarkeit Ihrer individuellen Herstellung über alle Arbeitsschritte

*Voraussetzung ist, dass Ihre Apotheke ein Abo für das DAC/NRF hat.
Außerdem ist durch LabXpert ein barrierefreier Zugang auf die aktuellen Ausgaben
DAC/NRF möglich.*



Durchgängige Benutzeroberfläche, die keinen Wechsel zwischen mehreren Programmen benötigt (z. B. integrierte Plausibilitätsprüfung)

Intuitive und einheitliche Benutzerführung – kompetent, einfach und effizient

Die Lösung: nur EINE Software statt umständlicher Programmwechsel
und Schnittstellenproblemen

Minimierter Schulungsaufwand und Reduzierung von Anwendungsfehlern



PRODUKTVIDEO
LabXpert
youtube.com/user/wepavideo

LabXpert – in 8 Schritten zur fertigen Rezeptur

Lassen Sie sich von der leichten Bedienbarkeit und verständlichen Bedienoberfläche unserer apotec® LabXpert Software überzeugen. Wir stellen Ihnen nachfolgend acht integrierte Tools vor, die Sie bei der Herstellung einer fertigen Rezeptur unterstützen. Damit stellen Sie so einfach und zuverlässig eine Rezeptur her, wie noch nie zuvor!

Schritt 1: Prüfung von Ausgangsstoffen



Mit der Hilfe von apotec® LabXpert haben Sie die Möglichkeit eine schnelle und einfache Prüfung von Ausgangsstoffen durchzuführen mit allen wichtigen Prüfvorschriften aus DAC, Alternativer Identifizierung (DAC), Ph. Eur., DAB.

Schritt 2: Schnelle Rezepturerfassung mit apotec® LabXpert



Nutzen Sie die Möglichkeit der Neuanlage einer Rezeptur: Hier können Sie auch schon auswählen, ob Sie z.B. nach dem „Sandwichverfahren“ in Mischsystemen arbeiten möchten.



Oder verwenden Sie Ihr persönliches Rezeptur-Archiv, in dem alle Ihre Rezepturvorgaben zu bereits hergestellten Rezepturen durch apotec® LabXpert abgespeichert werden.



Mithilfe der Suchfunktion bei NRF-Rezeptur-Vorschriften wird Ihnen bei Eingabe des Namens, der Nummer oder des Wirkstoffs einer Rezeptur eine Auswahl an Suchergebnissen für Ihre benötigte NRF-Rezeptur-Vorschrift angezeigt.



Um Ihre benötigte Rezeptur so einfach und schnell wie möglich herstellen zu können ist in die apotec® LabXpert Software der DAC/NRF Rezepturenfinder integriert. Dieser enthält über 2700 von Experten bewertete Rezepturen. Geben Sie einfach den Namen oder die NRF-Nr. einer Rezeptur ein und mit einem Klick können Sie die Rezeptur übernehmen, ganz ohne umständliches Abschreiben.

Schritt 3: Plausi-Check mit pharma4u



Mit dem integrierten Online-Plausibilitätscheck von pharma4u ist die Eingabe der Rezepturformel so einfach wie noch nie.

pharma4u
Die Plattform für Pharmazeuten

Schritt 4: Integrierte Texte für Herstellungsanweisungen – präzise und praxisnah



apotec® LabXpert bietet Ihnen die Möglichkeit passende Vorlagen z.B. für die Herstellung Ihrer halbfesten Zubereitungen auszuwählen. Ob Herstellung in der Fantaschale, im TOPITEC®, oder Unguator® – apotec® LabXpert enthält die darauf zugeschnittenen Anweisungstexte und führt Sie durch die Herstellung. Ebenso können von Ihnen individuell angelegte Vorlagen zur Herstellungsanweisung ausgewählt werden. Bei allen Varianten werden relevante Parameter festgelegt und dokumentiert.



Die apotec® LabXpert Herstellungsanweisung enthält Informationen zu Gefahrstoffen. Das Farbkonzept für die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist integriert.



Für die Nutzung automatischer Mischsysteme bietet Ihnen apotec® LabXpert Eingabemöglichkeiten für individuelle Parameter, aber auch einen Schnellaufgriff auf die TOPITEC® Rührparameter-Bibliothek mit validierten Rührparametern für Ihre Rezeptur.

Schritt 5: Herstellungsprotokoll



apotec® LabXpert dokumentiert lückenlos Ihre hergestellten Rezepturen mittels Herstellungsprotokoll gemäß §7 ApBetrO. Über die zentrale Geräteanbindung apotec® connect können eingegebene Mischparameter in der Software an Mischsysteme übermittelt, sowie tatsächliche Waagenwerte in die Software übertragen werden.

Schritt 6: Etikettendruck Rezeptur



Sie haben die Möglichkeit direkt nach der Herstellung ein passendes Rezepturetikett zu drucken.

Schritt 7: Herstellungsanweisungen im Archiv abrufbar



Ihre archivierten Rezepturen stehen abrufbar zur Verfügung und können jederzeit zur erneuten Rezepturerstellung verwendet werden.

Schritt 8: LabXpert®-Kunden-Forum



Im apotec® LabXpert-Kundenforum wird Ihnen ein Austausch mit anderen apotec® LabXpert-Nutzern ermöglicht. Ebenso stehen ihnen kompetente Fachberater der WEPA und unserem Partner Pharma4u auch online zur Verfügung.

apotec® connect –
die zentrale Geräteschnittstelle
zur LabXpert-Software

LabXpert
apotec®

FACH-TIPP

Mit Sicherheit Zeit sparen

Die apotec® LabXpert Software ist in Kombination mit der Geräteanbindung apotec® connect im deutschen Apothekenmarkt eine Innovation. Parameter von Labor- und Rezepturgeräten lassen sich automatisch in und aus der Software heraus in einem sicheren Datentransfer übertragen.

Sie sparen damit deutlich Zeit bei der Herstellung einer Rezeptur und erhalten mehr Sicherheit in der Dokumentation.



Vernetzt Ihren Gerätepark
von Waagen, Mischsystemen bis hin
zu Laborgeräten mit LabXpert

- + Eigenständiger „Mini-PC“ mit integrierter Speichersoftware
- + Speziell für Apotheken entwickelt
- + Entwicklung und Produktion in Deutschland

Mehr Informationen:
<https://software.labxpert.de>

KONNEKTIVITÄT

- ✓ 1 x RJ45 integrierter Anschluss für Ethernet 10/100 Mbit
- ✓ 8 x USB A 2.0 Anschluss
- ✓ 1 x USB B Anschluss als Service-Port
- ✓ 1 x RS232 Anschluss (9-polig)
- ✓ 1 x 5V Anschluss für externes Netzteil mit 6A Ausgangsstrom

LabXpert

apotec® connect –
die Geräteanbindung

Alle zukünftigen Geräteanbindungen als Update kostenlos

Best.-Nr. 026740

Mit dem apotec® connect wird Ihr Gerätepark von Waagen, Mischsystemen bis hin zu Laborgeräten netzwerkfähig

- + Betriebssystem unabhängige Software (Windows, Linux, IOS, Android)
- + Zentrale Schnittstelle in der Rezeptur
- + Anbindung und Übertragung von und zu Geräten
- + Vernetzte Prüfung und Herstellung



Übertragung von Mischparametern



Mischsysteme

Übernahme der Wäegergebnisse



Waagen

apotec® Teewaagen

apotec® Rezepturwaagen

apotec® Analysenwaagen

Übernahme der Schmelztemperatur



Schmelzpunktbestimmer

apotec® Schmelzpunktbestimmer MPplus

Übernahme des Brechungsindex



Refraktometer

apotec® Refraktometer VAR



Einfach reinschauen – in unser Produktvideo zu LabXpert



Dank der LabXpert Software und der Geräteanbindung apotec® connect:

- + können Parameter von Labor- und Rezepturgeräten automatisch in und aus der Software heraus in einem sicheren Datentransfer übertragen werden
- + werden relevante Informationen und Daten digital erfasst und 1:1 dokumentiert
- + können per Zugriff auf das Archiv alle Arbeitsschritte auf der Ebene der Ausgangsstoffprüfung und der Rezepturebene rückverfolgt und wiederholt werden
- + gibt es keine Flüchtigkeits- oder Übertragungsfehler mehr
- + wird die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems unterstützt
- + gelingt GMP* gerechtes Arbeiten

*Good Manufacturing Practice

Schließen Sie Ihre Rezeptur und Analytikgeräte per USB an den apotec® connect an und verbinden Sie diesen mit der LabXpert Software. Der apotec® connect sorgt für einen sicheren Datentransfer:

FACH-TIPP

apotec® NIR-System: Prüfprotokoll der Ausgangsstoff- prüfung beifügen

Sie haben die Möglichkeit eine Identitätsprüfung mithilfe des apotec® NIR-Systems Spektroskopie durchzuführen, z.B. anhand des Ausgangsstoffes „Basiscreme DAC“. Sobald Sie diese durchgeführt haben, kann das generierte NIR-Prüfprotokoll der Ausgangsstoffprüfung angehängt werden.



Datenübertragung Schmelztemperatur

- Durchführung einer Ausgangsstoffprüfung am Beispiel Clotrimazol
- Dokumentation der Ausgangsstoffprüfung in LabXpert aufrufen, alle relevanten Angaben zur Schmelztemperatur werden angezeigt
- Durchführung der Messung am apotec® MPplus
- Nach erfolgter Messung am MPplus bestätigen „Wert senden“
- Automatisierte Übertragung der gemessenen Schmelztemperatur in die Identitätsprüfung innerhalb der Ausgangsstoffprüfung der Software LabXpert



Datenübertragung Brechungsindex

- Durchführung einer Ausgangsstoffprüfung am Beispiel Propylenglycol
- Dokumentation der Ausgangsstoffprüfung aufrufen, alle relevanten Angaben zur Ermittlung des Brechungsindex werden angezeigt
- Durchführung der Messung mit apotec® VAR
- Nach erfolgter Messung am VAR bestätigen „Wert senden“
- Automatisierte Übertragung des Brechungsindex in die Identitätsprüfung innerhalb der Ausgangsstoffprüfung der Software LabXpert




PRODUKTVIDEO
LabXpert
youtube.com/user/wepavideo



Datenübertragung von Wäge-Ergebnissen

- Übernahme angezeigter Wägeergebnisse per Mausklick in die Software LabXpert
- Werte sofort im Herstellungsprotokoll sichtbar
- mehr Sicherheit in der Dokumentation durch Übernahme der Wägeergebnisse

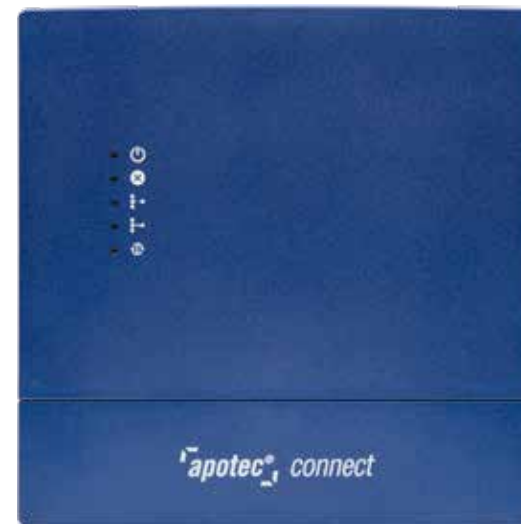

Datenübertragung Mischparameter an TOPITEC® System

- Auswahl der Mischparameter in der Software LabXpert
- Tipp: Nutzen Sie dazu die TOPITEC® Rührparameter-Bibliothek für eine schnelle Eingabe und sparen Sie Zeit!
- Übermittlung Mischparameter per Mausklick an das TOPITEC® Mischsystem
- automatisierte Übermittlung Mischparameter unterstützt die Herstellung in gleichbleibender Qualität
- in der Software LabXpert informiert ein Fortschrittsbalken über die verbleibende Verarbeitungsdauer

Informationen und Bestellmöglichkeiten

Allgemeine Informationen zur Laborsoftware und Geräteanbindung auf www.labxpert.de



ONLINE

www.labxpert.de

Verpassen Sie nie wieder spannende Web-Seminare oder News zu den Themen Labor & Rezeptur. Melden Sie sich direkt zu unserem Newsletter an.



THEMEN-NEWSLETTER

Jetzt anmelden und keine News mehr verpassen
www.wepa.cloud/newsletter



SHOP-NEWSLETTER

Jetzt anmelden und keine Angebote mehr verpassen
www.wepa.shop/newsletter

Bestellmöglichkeiten

Über unser LabXpert Kontaktformular:



KONTAKTFORMULAR

www.labxpert.de/kontakt



ONLINE-SHOP

www.wepa.shop/labxpert

WEPA Tipp:

In unserem Kundenportal wepa.cloud finden Sie neben interessanten Produktvideos auch Aufzeichnungen der letzten Web-Seminare rund um das Thema LabXpert.



KUNDENPORTAL

www.wepa.cloud



WEB-SEMINARE

www.wepa.cloud/fachwissen/web-seminare-e-learnings



Über unsere persönliche Beratung:

Kundenservice

Tel.: 02624 107-361, Email: info@labxpert.de

Montag bis Donnerstag von 08.00 - 17.00 Uhr

Freitag von 08.00 - 15.15 Uhr

Oder sprechen Sie Ihren WEPA-Fachberater und technischen Kundendienst an.



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid, www.wepa.shop
T +49 (0)2624 107-361, F +49 (0)800 5252500 (Bestell-Fax, gebührenfrei)
info@wepa-apothekenbedarf.de, www.wepa-dieapothekenmarke.de

