

apotec[®] connect

*die zentrale Geräte-
schnittstelle zu Ihrer
LabXpert-Software*

Keine versteckten
Update-Kosten

Zeitersparnis 

Dokumentation 

Transparenz 

Sicherheit 

apotec® connect

Die perfekte Ergänzung zu Ihrer LabXpert-Software

Verwenden Sie die Software LabXpert zusammen mit unserem apotec® connect. Mit dem apotec® connect wird Ihr Gerätepark von Waagen über Mischsysteme, bis hin zu Laborgeräten, netzwerkfähig.

Der apotec® connect macht einen direkten Datentransfer der Mess- und Herstellungsparameter möglich. So werden Übertragungsfehler vermieden und Sie erhalten mehr Sicherheit in der Dokumentation.


**Und das wichtigste:
Sie sparen noch mehr Zeit!**

LabXpert – eine Komplettlösung für Labor- und Rezepturprozesse – entwickelt von



*Sichern Sie sich jetzt
Ihren apotec® connect!*

LabXpert
apotec®

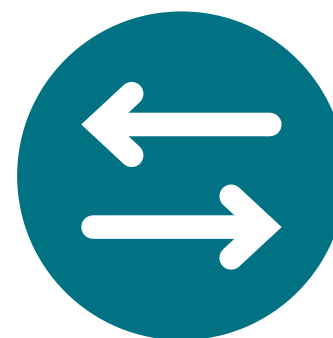

FACH-TIPP

Mit Sicherheit Zeit sparen

Die apotec® LabXpert Software ist in Kombination mit der Geräteanbindung apotec® connect im deutschen Apothekenmarkt eine Innovation. Parameter von Labor- und Rezepturgeräten lassen sich automatisch in und aus der Software heraus in einem sicheren Datentransfer übertragen.

Sie sparen damit deutlich Zeit bei der Herstellung einer Rezeptur und erhalten mehr Sicherheit in der Dokumentation.



Vernetzt Ihren Gerätepark von Waagen, Mischsystemen bis hin zu Laborgeräten mit LabXpert

Der apotec® connect ist die zentrale Geräte- Schnittstelle zu unserer Labor- und Rezeptursoftware apotec® LabXpert.

Schließen Sie Ihre Rezeptur und Analytikgeräte per USB an den apotec® connect an und verbinden Sie diesen mit der LabXpert Software.

- + Speziell für Apotheken entwickelt
- + Entwicklung und Produktion in Deutschland
- + PTB Zulassung

Mehr Informationen:
<https://software.labxpert.de>



KONNEKTIVITÄT

- ✓ 1 x RJ45 integrierter Anschluss für Ethernet 10/100 Mbit
- ✓ 8 x USB A 2.0 Anschluss
- ✓ 1 x USB B Anschluss als Service-Port
- ✓ 1 x RS232 Anschluss (9-polig)
- ✓ 1 x 5V Anschluss für externes Netzteil mit 6A Ausgangsstrom

apotec® LabXpert	Best.-Nr.	VE	PE	AEP
apotec® connect	026740	1	1	399,00 €

LabXpert


apotec® connect – die Geräteanbindung

Alle zukünftigen Geräteanbindungen als Update kostenlos

Best.-Nr. 026740

Mit dem apotec® connect wird Ihr
Gerätepark von Waagen, Mischsystemen
bis hin zu Laborgeräten netzwerkfähig

- + Betriebssystem unabhängige Software
(Windows, Linux, IOS, Android)
- + Zentrale Schnittstelle in der Rezeptur
- + Anbindung und Übertragung von und zu Geräten
- + Vernetzte Prüfung und Herstellung

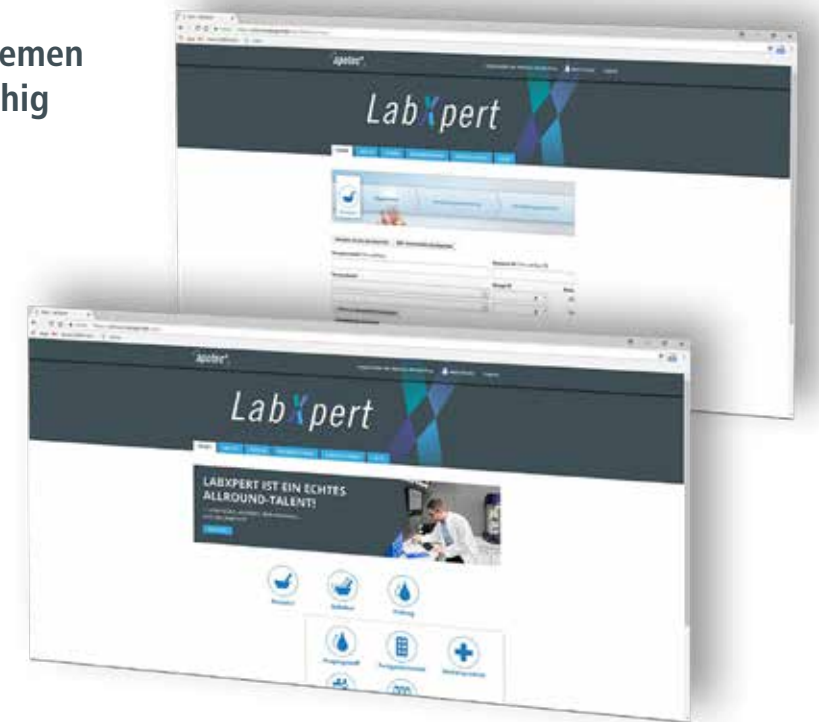

Übernahme der Schmelztemperatur

Schmelzpunkt-
bestimmer

apotec® Schmelzpunkt-
bestimmer MPplus

Übernahme des Brechungsindex

Refraktometer

apotec® Refraktometer VAR

Übernahme der Wäageergebnisse

Waagen

apotec® Rezepturwaagen

apotec® Analysenwaagen

apotec® Teewaagen

Übertragung von Mischparametern

Mischsysteme

TOPITEC® Touch

TOPITEC® Automatic

TOPITEC® Expert

Einfach reinschauen – in unser Produktvideo zu LabXpert



Dank der LabXpert Software und der Geräteanbindung apotec® connect:

- + können Parameter von Labor- und Rezepturgeräten automatisch in und aus der Software heraus in einem sicheren Datentransfer übertragen werden
- + werden relevante Informationen und Daten digital erfasst und 1:1 dokumentiert
- + können per Zugriff auf das Archiv alle Arbeitsschritte auf der Ebene der Ausgangsstoffprüfung und der Rezepturebene rückverfolgt und wiederholt werden
- + gibt es keine Flüchtigkeits- oder Übertragungsfehler mehr
- + wird die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems unterstützt
- + gelingt GMP* gerechtes Arbeiten

*Good Manufacturing Practice

Schließen Sie Ihre Rezeptur- und Analytikgeräte per USB an den apotec® connect an und verbinden Sie diesen mit der LabXpert Software. Der apotec® connect sorgt für einen sicheren Datentransfer:

FACH-TIPP

apotec® NIR-System: Prüfprotokoll der Ausgangsstoff- prüfung beifügen

Sie haben die Möglichkeit eine Identitätsprüfung mithilfe des apotec® NIR-Systems durchzuführen, z.B. anhand des Ausgangsstoffes „Basiscreme DAC“. Sobald Sie diese durchgeführt haben, kann das generierte NIR-Prüfprotokoll der Ausgangsstoffprüfung angehängt werden.



Datenübertragung Schmelztemperatur

- Durchführung einer Ausgangsstoffprüfung am Beispiel Clotrimazol
- Dokumentation der Ausgangsstoffprüfung in LabXpert aufrufen, alle relevanten Angaben zur Schmelztemperatur werden angezeigt
- Durchführung der Messung am apotec® MPplus
- Nach erfolgter Messung am MPplus bestätigen „Wert senden“
- Automatisierte Übertragung der gemessenen Schmelztemperatur in die Identitätsprüfung innerhalb der Ausgangsstoffprüfung der Software LabXpert



Datenübertragung von Wäge-Ergebnissen

- Übernahme angezeigter Wägeergebnisse per Mausklick in die Software LabXpert
- Werte sofort im Herstellungsprotokoll sichtbar
- mehr Sicherheit in der Dokumentation durch Übernahme der Wägeergebnisse



Datenübertragung Mischparameter an TOPITEC® System

- Auswahl der Mischparameter in der Software LabXpert
- Tipp: Nutzen Sie dazu die TOPITEC® Rührparameter-Bibliothek für eine schnelle Eingabe und sparen Sie Zeit!
- Übermittlung Mischparameter per Mausklick an das TOPITEC® Mischsystem
- automatisierte Übermittlung Mischparameter unterstützt die Herstellung in gleichbleibender Qualität
- in der Software LabXpert informiert ein Fortschrittsbalken über die verbleibende Verarbeitungsdauer



Datenübertragung Brechungsindex

- Durchführung einer Ausgangsstoffprüfung am Beispiel Propylenglycol
- Dokumentation der Ausgangsstoffprüfung aufrufen, alle relevanten Angaben zur Ermittlung des Brechungsindex werden angezeigt
- Durchführung der Messung mit apotec® VAR
- Nach erfolgter Messung am VAR bestätigen „Wert senden“
- Automatisierte Übertragung des Brechungsindex in die Identitätsprüfung innerhalb der Ausgangsstoffprüfung der Software LabXpert

Informationen und Bestellmöglichkeiten

Allgemeine Informationen zur Laborsoftware und Geräteanbindung auf www.labxpert.de



ONLINE
www.labxpert.de

Verpassen Sie nie wieder spannende Web-Seminare oder News zu den Themen Labor & Rezeptur. Melden Sie sich direkt zu unserem Newsletter an.



THEMEN-NEWSLETTER
Jetzt anmelden und keine News mehr verpassen
www.wepa.cloud/newsletter



SHOP-NEWSLETTER
Jetzt anmelden und keine Angebote mehr verpassen
www.wepa.shop/newsletter

Bestellmöglichkeiten

Über unser LabXpert Kontaktformular:



KONTAKTFORMULAR
www.labxpert.de/kontakt

Über unseren WEPA-Onlineshop:



ONLINE-SHOP
www.wepa.shop/labxpert

WEPA Tipp:

In unserem Kundenportal wepa.cloud finden Sie neben interessanten Produktvideos auch Aufzeichnungen der letzten Web-Seminare rund um das Thema LabXpert.



KUNDENPORTAL
www.wepa.cloud



WEB-SEMINARE
www.wepa.cloud/fachwissen/web-seminare-e-learning

Ihre persönliche Beratung:

Tel.: 02624 107-361, Email: info@labxpert.de

Oder sprechen Sie Ihre*n WEPA-Fachberater*in oder technischen Kundendienst an.



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid, www.wepa.shop
T +49 (0)2624 107-361, F +49 (0)800 5252500 (Bestell-Fax, gebührenfrei)
info@wepa-apothekenbedarf.de, www.wepa-apothekenbedarf.de

